

大肠菌群测试片

使用说明书

【产品名称】

通用名称：大肠菌群测试片

英文名称：Handy plate® Coliform Count Plate

【产品编号】HP 002

【包装规格】20 片/包

【产品简介】

Handy plate®大肠菌群测试片为预制备的即用型培养基产品，含有标准的培养基、冷水凝胶和显色指示剂。本产品可用于食品和饮料中大肠菌群的测定。

【使用说明】

1.样品制备

取样品 25 g(mL) 放入含有 225 mL 磷酸缓冲液（或生理盐水）的无菌均质杯或均质袋内，均质器混匀 1 min~2 min 制成 1:10 的样品匀液，必要时用无菌 1 mol/L NaOH 或 1mol/L HCl 溶液调节样品匀液 pH 至 6.8~7.2。用 1mL 无菌吸管或移液器吸取 1:10 匀液 1 mL，注入含有 9 mL 稀释液的试管内，振摇后成为 1:100 的样品匀液，以此类推制备 10 倍系列稀释的样品匀液，每次换一支吸管或移液枪头。

2.接种

根据对样品污染状况的估计，选择 2~3 个适宜的连续稀释度的样品进行检测。将大肠菌群测试片置于平坦实验台面，揭开上层膜，用无菌吸管或移液器吸取 1 mL 样品匀液滴加到测试片中央，缓缓盖上上层膜，排除多余空气，边缘少量气泡不影响观察结果。


3.培养

将测试片正面向上水平放置到培养箱中，36℃±1℃条件下培养 18 h~24 h。对于乳及乳制品，应置于 30℃±1℃培养 18 h~24 h。


4.判读

计数所有黄色酸环，周围有气泡的红色菌落。合适的计数范围在 15 CFU~150 CFU。如菌浓度过高，整个培养区域都呈黄色且无法计数，需对样品进一步稀释重新操作以获得准确的计数。如需分离菌落进行进一步分析，揭开上层膜用接种针将菌落挑出即可。


【操作图解】

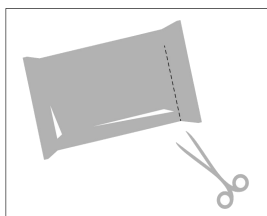


1、用剪刀沿虚线剪开，取出测试片盒。

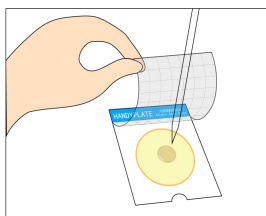


2、将测试片放在水平台面上，揭开覆膜，将1mL样品液滴加在纸片中心。

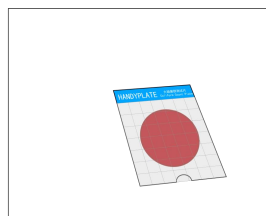

3、缓慢盖上覆膜，使其扩散吸收至整个培养区域。

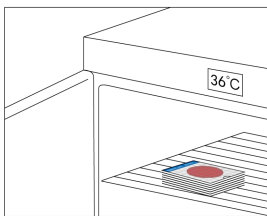

4、将测试片正面朝上，放置于恒温培养箱中，36±1℃培养18~24h。测试片堆叠不应超过20张。

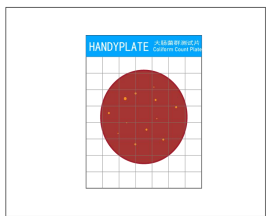

5、培养后的判读，根据判读手册判读测试片上是否有目标菌的生长，或对菌落进行计数。

【操作视频】



(扫描左侧二维码观看操作视频)

【储存条件与保质期】

2~8℃密封储存，有效期为 18 个月。

已打开包装未使用的测试片装回包装袋中，折叠后用不干胶贴密封，储存时间不超过 4 周为宜。

【废弃物处置】

测试片在使用之后可能包含微生物，需在 121℃ 30min 高压蒸汽灭菌处理后严格遵守按规定的方式处理。

【生产企业】

企业名称：广东环凯生物科技有限公司

生产地址：肇庆高新技术产业开发区科技大街中 13 号

销售热线：0758-3680999-8001

技术热线：0758-3680999-8018

邮政编码：526238

企业网址：<http://www.bhkbio.com>